

QUICK & EASY  
ANIMAL IOP MEASURING

icare  
TONOVET  
Plus

トノベットPlus 手持眼圧計  
TV011



# icare TONOVET Plus

トノベットPlusは、アイケアフィンランド社により開発された  
麻酔薬不要の手持眼圧計です。


- 面倒なキャリブレーションは不要で、プローブを装填したらわずか数秒で測定を完了します。
- 測定に特別なテクニックは不要です。再現性の高いデータが得られます。
- プローブは清潔に個包装された Disposable タイプ。  
直径はわずか1.7mmで、角膜への接触もソフトなため、点眼麻酔は不要です。

## The new level of veterinary IOP Measuring

トノベットが進化！ Plusでは【4つの新機能】が搭載され、使いやすさと精度が向上されました。

### BETTER ACCURACY

トノベットPlusは犬、猫、ウサギ、馬と4つの動物種に合わせて測定できる唯一の眼圧計です。  
動物の眼は種によって特徴があり、その種に合わせた設定を選択することで、正確な眼圧測定が可能です。

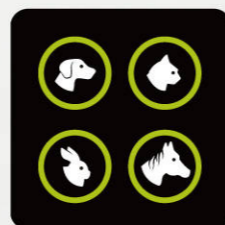

### EASIER TO USE



#### icare<sup>®</sup> モードセレクト

シングル・連続の2つの測定  
モードが選べます。



#### icare<sup>®</sup> イージーナビ

大きくなったディスプレイと、  
使いやすいユーザーインター  
フェースが特徴です。



#### icare<sup>®</sup> イージーポジショニング

測定位置サポート機能で正しい測定位置を赤と緑のLEDで  
知らせます。



IOP measuring with the **TONOVET Plus**




NO ANESTHESIA  
NO CALIBRATION





トノベットPlusは動物種ごとに、マノメトリー<sup>※</sup>を用いた眼圧値と相関するよう設計されています。

※ 眼球にカニューラを挿入して実際の眼圧値を求める方法

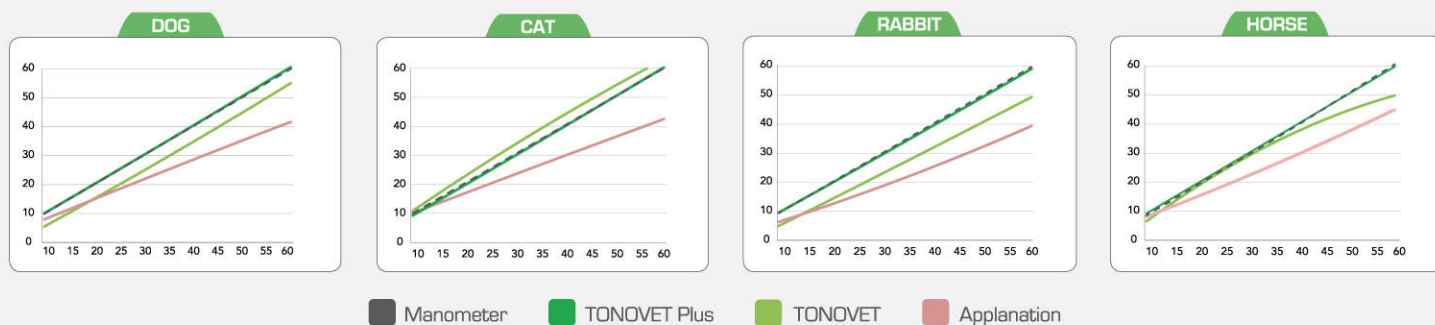

仕様	
製品番号	TV011
測定範囲	10~60mmHg
データ保存	10件
寸法	約24-29mm(W)×35-95mm(H)×215mm(L)
重量	約230g(電池込み)
電源	単3アルカリ電池 4本
電撃に対する保護の形式	内部電源機器
電撃に対する保護の程度	BF形装着部をもつ機器
動物用医療機器承認番号	29動業第3745号
製造業者	アイケア フィンランド社 (Icare Finland Oy)

### TV011 トノベットPlus 手持眼圧計 740,000円(税別)

製品構成: トノベットPlus手持眼圧計本体  
 ディスポーザブルプローブ100本、プローブベース、単3アルカリ電池4本、取扱説明書、操作ガイド、保証書、キャリングケース

消耗品 : **TV011-1** ディスポーザブルプローブ100本入 18,000円(税別)  
**TV011-2** プローブベース 11,000円(税別)

### TA650 卓上・壁掛けスタンド トノベットPlus用 28,000円(税別)

トノベットPlus手持眼圧計専用のスタンドです。  
 卓上・壁掛け、2通りのご使用ができます。

幅130mm × 高さ295mm × 奥行き160mm(卓上)/  
 奥行き115mm(壁掛け)



株式会社 エムイーテクニカ

本社 〒170-0002 東京都豊島区巢鴨1-34-4  
 TEL.03-5395-4588 FAX.03-5395-4866

大阪 〒533-0012 大阪市東淀川区大道南3-2-12  
 TEL.06-6829-7912 FAX.06-6829-7922

札幌 〒007-0884 札幌市東区北丘珠四条1-20-2  
 TEL.011-792-6522 FAX.011-792-6522

福岡 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-28-706  
 TEL.092-432-3740 FAX.092-432-3741

最新情報はホームページで [www.met Technica.co.jp](http://www.met Technica.co.jp)

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。

製造販売業許可番号: 28製販療II第16号

201910-1-5000