

動物用 一般医療機器 その他の検眼用器具

# アイリスベット light

IRIS-Vet light cPLR Tester

## 視覚の減弱・喪失の原因を スクリーニング

簡単・便利

軽量・コンパクト



【仕様】寸法：幅86mm×奥行180mm×45mm／重量：230g

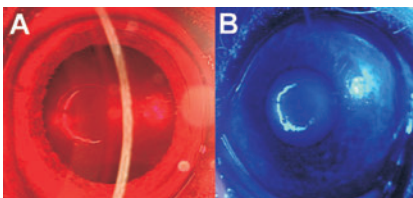
### 短時間で眼疾患を簡単スクリーニング

1 突発性後天性網膜変性 (SARDS) の診断補助

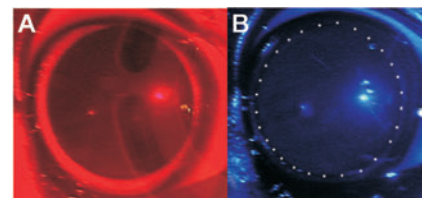
2 遺伝性網膜変性の診断補助

3 視神経炎または髄膜炎、下垂体腫瘍または視交叉腫瘍の診断補助


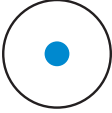

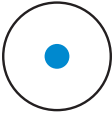


網膜疾患の一例




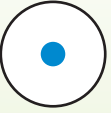



視神経疾患、中枢神経 (CNS) 障害



# おもな視覚異常におけるアイリスベットlightによる対光反射試験の評価表

疾患名	視 覚	威嚇試験 (メナス試験)	眩惑反射試験	アイリスベットlightによる対光反射試験		網膜電図検査 (ERG)
				赤色光反射	青色光反射	
突発性後天性 網膜変性 (SARDS)	—	—	+			—
網膜変性(遺伝性)	— + または —	— + または —	+			— + または —
視神経炎または 髄膜炎、下垂体腫瘍 または視交叉腫瘍	— または — +	— または — +	—			+

※アイリスベット(メラン100)の取扱説明書より一部改変

凡 例	正 常	消 失	低 下
+ …… 正常 — …… 消失 —+ …… 低下 —/+ …… 通常は消失しているが、 正常である場合もある。			  

FAX

送信方向

アイリスベット light | デ | モ | 依 | 頼 | フ | オ | ー | ム |

FAX 052-325-3843      Email meni-one@menicon.co.jp

動物病院名	都道府県
お 名 前	
電 話 番 号	(            )            -

メニワンHPからのご依頼はこちらから

https://www.meni-one.com/04-contact-demonstration.php



受付後、担当よりご連絡を差し上げます。      [取扱店・担当者]



株式会社 メニワン  
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地  
ミュキビジネスパーク四号館  
TEL (052) 325-3823    FAX (052) 325-3843



取扱店