

動物用 視力補正用レンズ

# メニワンX<sup>ten</sup>

動物用で10年以上の実績  
疎水性軟性アクリル  
を使用!



※疎水性軟性アクリル(シングルピース)は  
「メニワンF」と同じ素材(着色剤を除く)です。




## 製品特長

- 1 光学部と支持部は  
**疎水性軟性アクリル**  
(シングルピース)
- 2 インジェクターを用いて  
**約3mmの切開創から**  
**レンズの挿入**が出来ます
- 3 **ワンサイズ**で  
犬種を選びません
- 4 **網膜保護とセッティング時の**  
**視認性を高める着色レンズ**




## 仕様

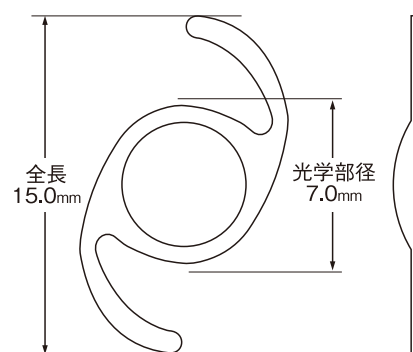


全 長: 15.0mm  
光 学 部 径: 7.0mm (有効光学部径5.5mm)  
支持部角度: 0°  
支持部厚み: 0.30mm  
度 数: 41.0D  
光学部及び支持部素材: 疎水性軟性アクリル

# 開発から製造までを一貫して国内で行い、 安心・安全なレンズをお届けします。

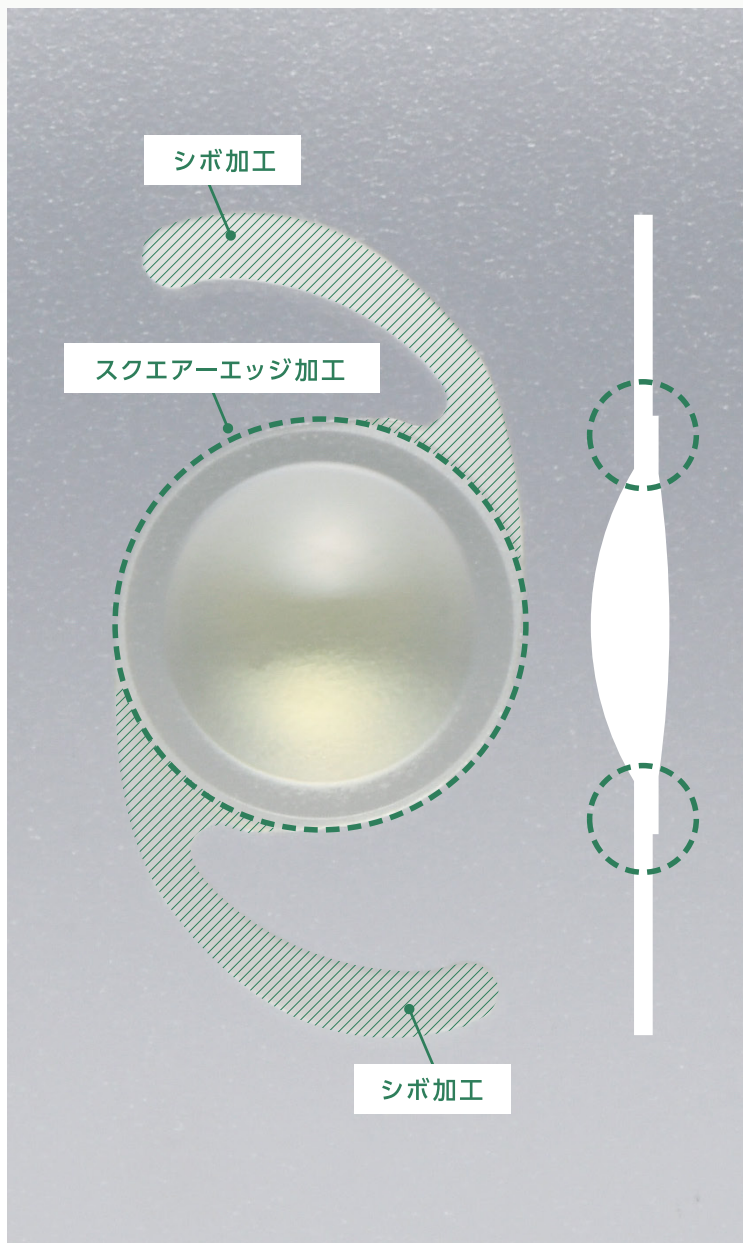

## Point 1

### :: 後発白内障の軽減

図中  部分の光学部には直角に近い加工を施しています。支持部の根本を含む全周に渡って後発白内障を軽減すると言われていたスクエアエッジ加工が施されています。

## Point 2

### :: 取扱い易さ


疎水性軟性アクリル素材特有の粘着性を低減するためのシボ加工が、支持部全体に施してあります。

## Point 3

### :: 嚢内安定性

犬眼球サイズに合わせて光学部径を7mmに拡大し、嚢内安定性を高めました。

### :: 家兎眼埋植例

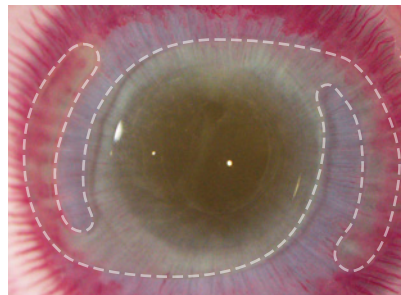

埋植4週間後のMiyake View  
(網膜側から嚢内のレンズ位置を観察)

お問い合わせはコチラ

☎052-325-3823

 Meni-One

 Menicon  
GROUP

株式会社 メニワン  
〒452-0805 名古屋市西区市場木町390番地  
ミュキビジネスパーク四号館  
TEL (052) 325-3823 FAX (052) 325-3843



取扱店